



Efficiente, versatile, ergonomica

Centralina di inclusione Histostar di Epredia


epredia

Centralina di inclusione HistoStar di EpreDia

Accattivante, confortevole e organizzata



- Vassoio portadocumenti incorporato per la conservazione dei fogli di lavoro
- La piastra fredda modulare con capacità di 72 blocchi consente il posizionamento a sinistra o a destra della stazione di inclusione per un flusso di lavoro ottimale ed è dotata di rivestimento antimicrobico
- L'ampio serbatoio della paraffina da 5 L è dotato di un sistema di filtraggio progettato per impedire l'ingresso di detriti nell'ugello di erogazione
- Comodo cassetto per riporre le cose in modo facilmente accessibile

Progettata per l'efficienza


- Grande capacità di 5 L di paraffina, una ampia piastra fredda della capacità di 72 blocchi e uno stoccaggio per 300 cassette.
- La stazione di inclusione EpreDia™ HistoStar™ è progettata per ridurre al minimo i requisiti di assistenza, garantendo prestazioni affidabili per gli anni a venire.

Flessibilità per adattarsi al vostro flusso di lavoro

- La paletta di erogazione della paraffina regolabile della stazione di lavoro HistoStar consente agli utenti di regolare facilmente la paletta nella posizione più ergonomica.
- Una varietà di lunghezze di ugelli per adattarsi al vostro flusso di lavoro, comprese le cassette Supa Mega.
- Il Paratrimmer EpreDia integrato offre la comodità di risparmiare spazio.
- Mantenere uno spazio di lavoro pulito con un efficiente percorso dei residui di paraffina.

Comfort

- Design liscio e sagomato, che elimina i fastidiosi punti di pressione, e isolamento per garantire il comfort per tutto il giorno con uno spazio di lavoro comodo.
- L'intensità della luce è facilmente regolabile con cinque livelli di illuminazione a LED per le aree dei campioni e degli accessori, illuminando uniformemente l'area di lavoro, riducendo l'affaticamento e minimizzando gli errori.

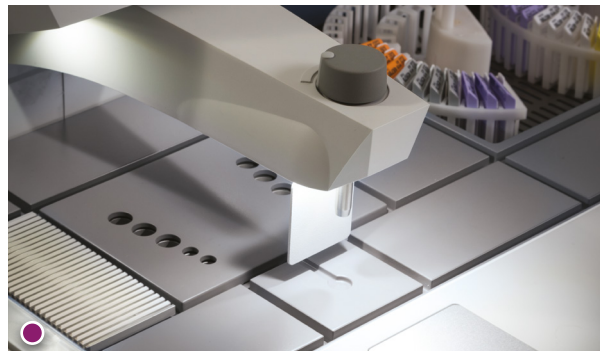

- Temperatura della piastra fredda regolabile dall'utente, progettata per ridurre l'insorgere di blocchi con crepe
- Stoccaggio ad alta capacità per 300 stampi base standard, 300 cassette e 6 cestelli EpreDia Revos™ o 4 cestelli Excelsior™
- L'illuminazione a LED con cinque impostazioni di luminosità offre un'illuminazione ottimale sia per il campione che per l'area degli accessori
- L'area accessori offre dieci posizioni di utensili con cinque diverse dimensioni di fori
- Design ParaTrimmer, ottimizzato per la massima produttività
- Sistema di controllo touch screen intuitivo e multilingue

Specifiche della workstation di inclusione EpreDia HistoStar

Dimensioni	Modulo da inclusione (L, P, A)	26 x 26 x 17 pollici (650 x 645 x 435 mm)
	Piastra fredda (L, P, H)	17 x 26 x 15 pollici (430 x 645 x 380 mm)
Peso	PesoModulo di inclusione	55.12 libbre (25 kg)
	Piastra fredda	44.10 libbre (20 kg)
Livello di rumore operativo		>65 dB
Capacità, serbatoio della paraffina		1.32 galloni (5 litri)
Temperature	Serbatoio della paraffina	122 - 158 °F (50 - 70 °C)
	Punto freddo	41 °F (5 °C)
	Punto caldo	122 - 158 °F (50 - 70 °C)
	Conservazione dei tessuti	122 - 158 °F (50 - 70 °C)
	Conservazione delle formelle	122 - 158 °F (50 - 70 °C)
	Piastra fredda	Regolabile, da 10 a 27 °F (da -12 a -3 °C) con una tolleranza di $\pm 1,8$ °F (1 °C)



Stazione di lavoro per
l'incorporazione HistoStar
di EpreDia

Informazioni per l'ordine

Descrizione		Numero d'ordine
Stazione di inclusione	220 - 240 Vac 50/60Hz	A81000001
HistoStar unità con piastra fredda	100 - 120 Vac 50/60Hz	A81000002
	220 - 240 Vac 50/60Hz (solo in Cina)	A81000003
Piastra fredda Histostar	220 - 240 Vac 50/60Hz	A81000004
	100 - 120 Vac 50/60Hz	A81000005
	220 - 240Vac 50/60Hz (solo in Cina)	A81000006
Modulo di inclusione	110 - 120 Vac / 220 - 240 Vac 50/60Hz	A81000007
HistoStar110	220 - 240 Vac 50/60Hz (solo in Cina)	A81000008
Pestelli, set di 1 x 20 mm and 1 x 12 mm		A81010030
Kit di spatole, set di due		A81010031
Coperchio del stoccaggio delle cassette		A81010026
Gruppo lente d'ingrandimento		A81010032
Interruttore a pedale		AP16629
Pinza elettrica riscaldata, rossa, punta da 1 mm		A81010033
Kit porta documenti		A81010036

Un'inclusione efficiente richiede un'eccellente paraffina

Consegna, affidabilità, assistenza tecnica impareggiabile e qualità superiore del prodotto sono tutti elementi che si ricevono con ogni confezione di paraffina EpreDia™ Histoplast™. Composte da paraffina e polimeri plastici, queste tre paraffine garantiscono una processazione eccellente e producono sezioni sottili, piatte e prive di pieghe. Contattate il vostro rappresentante EpreDia per un confronto diretto.

Descrizione	Quantità	Numero d'ordine
Histoplast PE	8 sacchi da 1 kg	8330
Histoplast IM	8 sacchi da 1 kg	8331
Histoplast LP	8 sacchi da 1 kg	8332



Per saperne di più, visitate il
sito **epredia.com**

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | Stati Uniti | +1 (800) 522-7270

© 2026 EpreDia. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di EpreDia, se non diversamente specificato. **M42005 R022026 IT**

epredia
A Member of PHC Group