



Une précision qui assure la conservation de son éclat

Lames de microtome et de cryostat

La différence Epredia

- Lames conçues pour divers tissus
- Lames à profil haut et bas compatibles avec les microtomes et cryostats de la plupart des fabricants
- Un angle de biseau plus prononcé facilite une découpe rapide en rubans
- Sécurité renforcée pour l'utilisateur grâce à un boîtier de lame unique permettant le chargement dans les porte-lames de microtomes Epredia de type E

MX35 Ultra+ : une qualité de coupe de bout en bout

Conçue pour durer, notre lame de microtome la plus avancée garantit une excellente qualité de coupe tout au long de son utilisation.

- Un procédé de fabrication unique garantit un tranchant résistant pour une qualité de coupe constante
- Longévité accrue grâce à des revêtements en PTFE durs et extra-durs
- Permet d'obtenir des coupes de haute qualité dans les tissus durs pendant 59 % plus longtemps que les lames Epredia Ultra*

* D'après des données internes

Découvrez la différence.

Contactez votre responsable commercial Epredia local ou rendez-vous sur [epredia.com](https://www.epredia.com)




Lames jetables Epredia pour microtomes et cryostats



+ Meilleure
++ Meilleur
+++ Amélioré

Référence	Description	Angle de coupe	Tissus mous	Tissus durs	Coupe fine	Cryostat
Profil bas						
● 3054835 MX35 Ultra+™	Revêtement en PTFE extra-dur à deux couches et traitement de durcissement de l'acier exclusif pour une longévité exceptionnelle. Idéal pour tous les types de tissus FFPE, en particulier les tissus durs, et les coupes congelées.	34°	++	+++	++	++
● 3053835 MX35 Ultra™	Traitement de durcissement de l'acier exclusif et revêtement en PTFE dur pour une excellente longévité. Idéal pour les et aux coupes congelées.	34°	++	++	++	++
● 3052835 MX35 Premier +™	Pour une grande variété de tissus et des coupes minces de haute qualité, avec revêtement en PTFE dur.	34°	+	++	+	+
● 3051835 MX35 Premier™	Revêtement en PTFE dur pour les applications courantes.	34°	+	+	+	+
● 3050835 MB35™ Premier	Revêtement en PTFE souple pour les applications courantes.	34°	+	+	+	+
● 3050822 MB22 Premier™	Angle de lame plus prononcé et revêtement en PTFE souple pour faciliter les coupes ultra-fines.	22°	+	–	++	++
Très médiatisé						
● 3153735 HP35 Ultra™	Traitement de durcissement de l'acier exclusif et revêtement en PTFE dur pour une excellente longévité. Idéal pour les tissus FFPE et les coupes congelées.	34°	++	++	++	++
● 3150734 HP35™	Revêtement en PTFE dur pour les applications de routine.	34°	+	++	++	

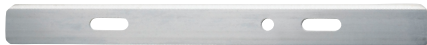

LLames à profil bas – 0,254 x 8 x 80 mm



Lames à profil haut – 0,31 x 14 x 75,7 mm