



Efficace, Polyvalente, Ergonomique

Station d'inclusion HistoStar Epredia



HistoStar Epredia

Poste de travail d'inclusion

Fraîcheur, confort et maîtrise



- Plateau porte-documents intégré pour le rangement des rapports
- Plaque froide modulaire d'une capacité de 72 blocs, positionnable à gauche ou à droite de la station d'inclusion pour un flux de travail optimisé ; dotée d'un revêtement antimicrobien
- Grand réservoir de paraffine de 5 L équipé d'un système de filtration empêchant les débris de pénétrer dans la buse de distribution
- Tiroir de rangement pratique et facilement accessible

Conçue pour la performance


- Grande capacité de paraffine (5 L), plaque froide pour 72 blocs et rangement pour 300 cassettes.
- La station d'inclusion EpreDia™ HistoStar™ est conçue pour limiter les besoins de maintenance et garantir une performance fiable sur le long terme.

Flexibilité adaptée à votre flux de travail

- Palette de distribution de paraffine réglable pour un positionnement ergonomique personnalisé.
- Différentes longueurs de buse disponibles, y compris pour les cassettes Super Mega.
- EpreDia™ ParaTrimmer™ intégré, pour un gain de place optimal.
- Espace de travail propre grâce à un système efficace de collecte des résidus de cire.

Confort thermique

- Design fluide et profilé éliminant les points de pression, avec isolation thermique pour un confort optimal tout au long de la journée.
- Éclairage LED réglable sur cinq niveaux d'intensité, assurant un éclairage uniforme des zones de travail (échantillon et accessoires), réduisant la fatigue visuelle et minimisant les erreurs.

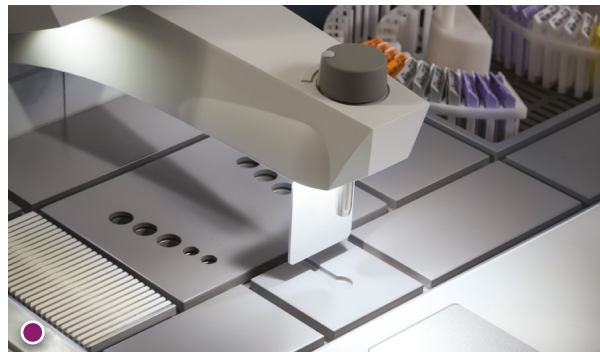

- Température de la plaque froide réglable par l'utilisateur conçue pour réduire l'apparition de blocs fissurés.
- Rangement de grande capacité pour 300 moules de base standards, 300 cassettes et 6 paniers EpreDia Revos™ ou 4 paniers Excelsior.
- Éclairage LED avec cinq niveaux de luminosité offrant un éclairage optimal pour les zones des échantillons et des accessoires.
- Zone accessoires offrant dix emplacements pour outils avec cinq tailles de trous différentes.
- Design du ParaTrimmer, optimisé pour une productivité maximale.
- Système de contrôle à écran tactile intuitif et multilingue.

Spécifications de la station d'inclusion HistoStar Epredia

Dimensions	Module d'inclusion (L, P, H)	650 x 645 x 435 mm
	Cold plate (W, D, H)	430 x 645 x 380 mm
Poids	Module d'inclusion	25 kg
	Plaque froide	20 kg
Niveau sonore en fonctionnement		>65 dB
Capacité du réservoir de cire		5 litres
Températures	Réservoir de cire	50 - 70 °C
	Zone froide	5 °C
	Zone chaude	50 - 70 °C
	Stockage des tissus	50 - 70 °C
	Stockage des moules	50 - 70 °C
	Plaque froide	Réglable, -12 à -3 °C avec une tolérance de ± 1 °C



HistoStar Epredia
Poste de travail d'inclusion

Informations de commande

Description	Référence
Unité de distribution HistoStar 220 - 240 V~ 50/60 Hz avec plaque froide	A81000001
Plaque froide HistoStar 220 - 240 V~ 50/60 Hz	A81000004
Module d'inclusion HistoStar 110 - 120 V~ / 220 - 240 V~ 50/60 Hz	A81000007
Kit de 2 press-échantillons HistoStar : 1 x 20 mm et 1 x 12 mm	A81010030
Kit de 2 spatules HistoStar	A81010031
Couvercle de rangement pour couvercles de cassettes	A81010026
Loupe avec support	A81010032
Pédale de commande	AP16629
Pince chauffante électrique rouge, pointe 1 mm	A81010033
Kit porte-documents	A81010036

Une inclusion efficace nécessite une paraffine exceptionnelle

La livraison, la fiabilité, un support technique inégalé et une qualité de produit supérieure font partie de ce que vous recevez avec chaque sachet de paraffine Epredia™ Histoplast™. Composées de paraffine et de polymères plastiques, ces trois paraffines offrent un excellent traitement et produisent des coupes fines, planes et sans plis. Contactez votre représentant Epredia local pour une comparaison côte à côte.

Description	Quantité	Référence
Histoplast PE	8 sachets de 1 kg	8330
Histoplast IM	8 sachets de 1 kg	8331
Histoplast LP	8 sachets de 1 kg	8332



Pour en savoir plus, rendez-vous sur [epredia.com](https://www.epredia.com)