




Epredia STP 120 Processore di tessuti

STP 120 offre un sistema di trattamento dei tessuti coerente, economico e innovativo per supportare l'eccellenza operativa del vostro laboratorio.

Il processore di tessuti STP120 di Epredia assicura coerenza, promuove l'integrità dei tessuti e la sicurezza dell'utente finale durante l'intero processo di lavorazione.

Il display LCD fornisce informazioni complete, tra cui il tempo rimanente, la durata del programma, la temperatura della paraffina, la data e l'ora.

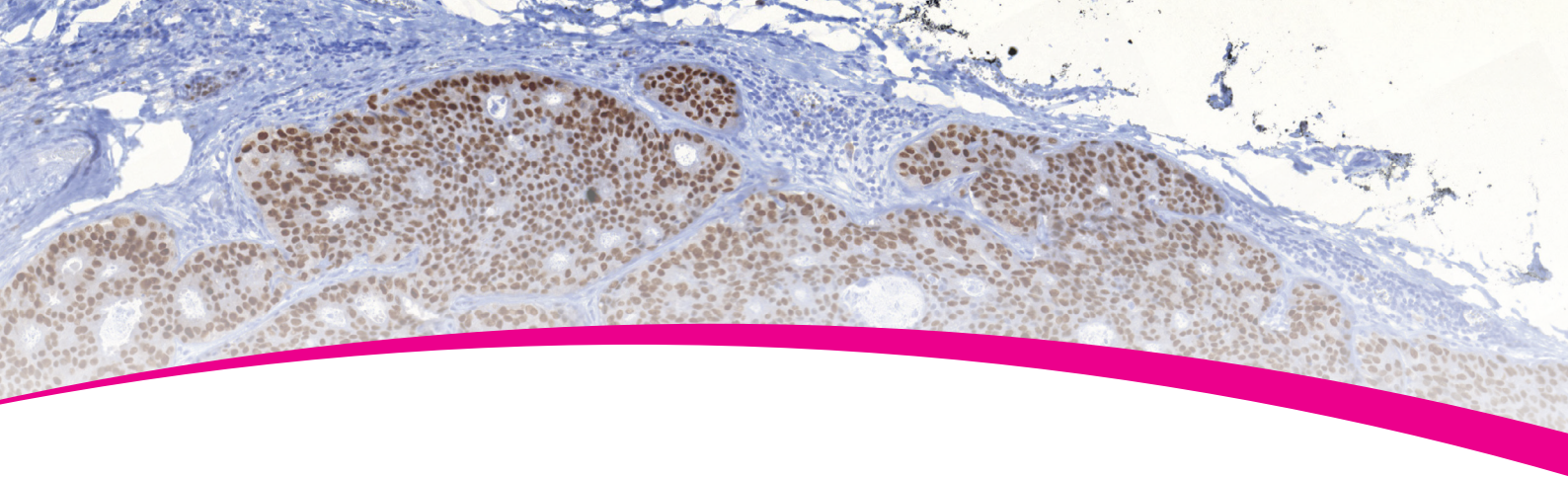

Design innovativo

Con un design completamente automatizzato, il cestello cambia automaticamente la direzione di agitazione ogni 60 secondi.

Promuove una miscela omogenea, riduce al minimo la contaminazione incrociata e consente di risparmiare sui costi dei reagenti.

Facilità d'uso e sicurezza

- Memorizza fino a dieci programmi diversi
- Modalità di avvio immediato o ritardato
- Il design ergonomico consente un accesso completo ai reagenti
- Configurazioni che includono sistemi di estrazione

Funzionamento a prova di guasto

Sistema di backup a batteria potenziato, gli esemplari si abbassano automaticamente all'interno dell'imbarcazione e riprendono il programma una volta ripristinata l'alimentazione.



Descrizione del prodotto

Cat. No.

STP 120-3 Processore di tessuti con sistema di estrazione dei fumi, secondo cestello per cassette incorporato e stazione di paraffina aggiuntiva

813160

Specifiche tecniche

Diametro: 85 cm

Altezza: 50-70 cm

Peso: 70 kg

Capacità: 240 cassette

Per saperne di più, visitate il sito
epredia.com

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | Stati Uniti | +1 (800) 522-7270

© 2024 Gruppo Epredia. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Epredia e delle sue filiali, se non diversamente specificato. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di zona. **M2400149 R112024 IT**

epredia
A Member of PHC Group